




PharmaMOP® GO

# 手柄 & 框架

免提、免纤维的无尘室拖地

## PharmaMOP® GO 的不同

- **快速装配和拆卸。** 拖把头的框架容易滑进拖把头的口袋里，方便快速插入和处理拖把头。
- **符合人体工程学的脚踏开关。** 站直时扔掉拖把头。丢弃时不再触摸脏拖把-不再弯腰。
- **低轮廓设计。** 双向360° 旋转，1.5英寸的低轮廓设计，使其能够进入狭窄的空间，减少以前无法清洁的“死点”。
- **出色的手柄。** 完全热压、重量轻、铝把手可以从39伸缩到65英寸（99-165cm），很适合在墙壁、地板和天花板使用。

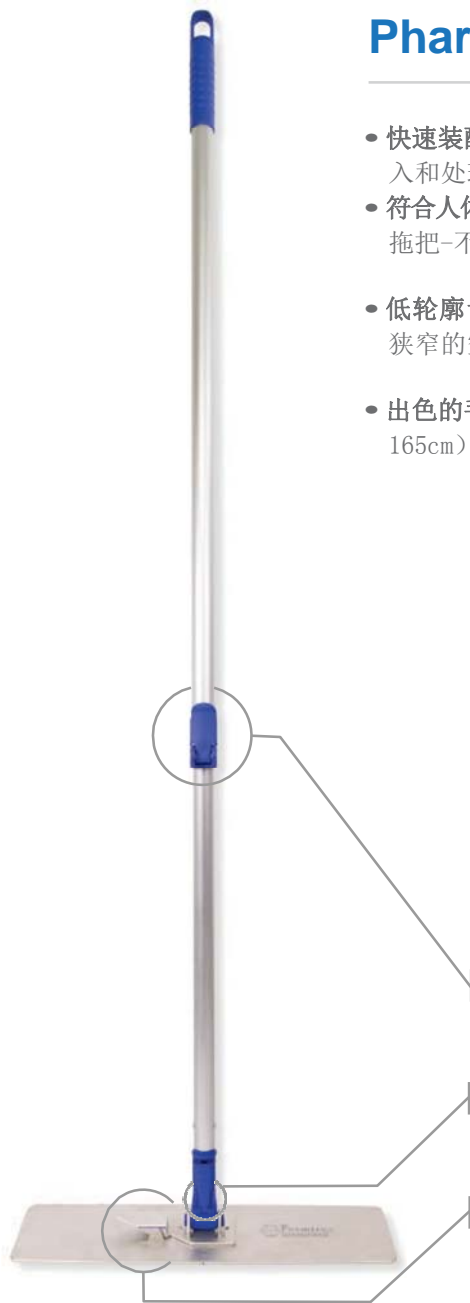

## 特征 & 好处

1

可伸缩把手能有效清洁墙壁、地板和天花板。

2

360° 旋转锁可以用于图8和平拖地。

3

V-锁杆可以简单，快速插入和处理拖把头。



Foamtec International  
720 Venture Dr.  
Waco, TX 76712

Foamtec International WCC Division

1-760-599-7160

www.foamtecintlwcc.com | customerservice@foamtecintlwcc.com

©2020 Foamtec International. All rights reserved. PharmaMOP® is a registered trademark of Foamtec International.  
We reserve the right to correct any errors that may occur within this datasheet.



PharmaMOP® GO

# 拖把头

免提、免纤维的无尘室拖地

## Sahara+ PharmaMOP® GO 拖把头



- **先进的结构。** 吸水性无尘室泡沫芯是用超声波焊接在一层无绒杂化超细纤维和双层Sahara®泡沫擦洗带之间的，以获得卓越的清洁效果。
- **减少表面微生物污染。** 在均匀涂抹消毒剂的同时，独特的拖把头材料可以清除残留和土壤，满足接触时间的要求。
- **减少工作时间。** 超声波密封的口袋让拖把框架滑入拖把头，并在几秒内准备好可以开始使用。
- **终极兼容性。** 有效清洁墙壁、地板和天花板。与漂白剂、季铵盐、过乙酸、过氧化物和IPA类清洁剂和消毒剂兼容。
- **质量生产。** 生产于一个全自动生产线的ISO 13485和ISO 9001的工厂，适用于ISO 3-9洁净室，可用在伽玛辐射SAL 10-6。

## 特征 & 好处

- 1** Sahara® 泡沫擦洗条去除污染物，并提供优越的耐磨性。
- 2** 无棉绒混合超细纤维织物去除微生物污染和顽固附着的消毒剂残留物。
- 3** Sahara® 泡沫擦洗带和超细纤维的结合，即使在高摩擦防滑的洁净室地板上，也能提供最佳的滑动。
- 4** 内含的泡沫芯有高吸水性可以均匀涂抹消毒剂和70%IPA，以提高清洁性能满足接触时间。
- 5** 超声波密封边缘提供了卓越的使用中的颗粒控制。



Foamtec International  
720 Venture Dr.  
Waco, TX 76712

Foamtec International WCC Division  
1-760-599-7160

www.foamtecintlwcc.com | customerservice@foamtecintlwcc.com



PharmaMOP® GO


# 桶 & V-支架

免提、免纤维的无尘室拖地

## PharmaMOP® GO 桶和 V-支架

不锈钢V型支架嵌入到特殊设计的拖把桶中，使得拖把头在拖把架上可以免提组装。此外，对于需要一次性使用的拖把头，可将拖把头预浸在桶中进行清洗。

桶和支架系统可容纳多达12个拖把头。所有组件都是安全的热压罐，设计用于ISO Class 3-9洁净室。

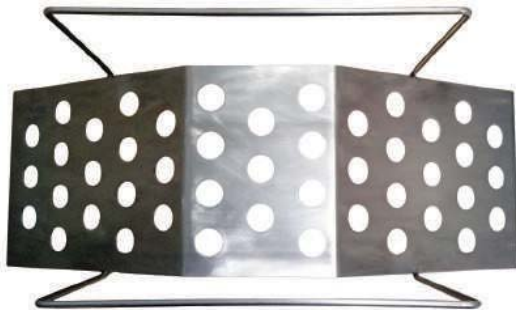

Foamtec International  
720 Venture Dr.  
Waco, TX 76712

Foamtec International WCC Division

1-760-599-7160

[www.foamtecintlwcc.com](http://www.foamtecintlwcc.com) | [customerservice@foamtecintlwcc.com](mailto:customerservice@foamtecintlwcc.com)

©2020 Foamtec International. All rights reserved. PharmaMOP® is a registered trademark of Foamtec International.  
We reserve the right to correct any errors that may occur within this datasheet.



# PharmaMOP® GO

## Cleanroom Mop System 免提、免纤维的无尘室拖地

### PharmaMOP® GO 技术数据

推荐的高压灭菌器设置\*

暴露温度	121°C
暴露时间	30 分钟
循环类型	重力
循环时间	20 分钟
压力	17.5 psig

PharmaMOP® GO 拖把头	通过Helme鼓测试的粒子数据 (粒子/拖把头)
0.5 - 10.0µm	≤ 700

\*推荐的高压灭菌器设置适用于杠杆锁定拖把手柄、头框和洁净室拖把头。

### PharmaMOP® GO 订购信息

#### PharmaMOP® GO 拖把头

型号	描述	拖把头/包	包/箱
FS879SH-1	Sahara+ PharmaMOP® GO拖把头 - 单独包装	1	200
FS879SH	Sahara+ PharmaMOP® GO 拖把头	5	40
FS879SHST	无菌 Sahara+ PharmaMOP® GO拖把头 -单独包装	1	200

#### PharmaMOP® GO 手柄和配件

型号	描述	数量
FT430	15" PharmaMOP® GO 手柄 w/ 在伸缩手柄上带有v形锁的锁定头框架	1
FT432	不锈钢v形支架, 便于免提组装和拆卸 (15.8" x 5.5" x 7.7")	1
FT408-DB	带框架的双桶系统	1
FT409BL	蓝色的洁净室桶 (20.5" x 10.5" x 10.5")	1

#### PharmaMOP® GO Starter Kit

Part No.	描述	数量
FS4500-PHMGO	PharmaMOP GO入门套件 - FT430 (1), FT432 (1), FT409BL (1), FS879SH (25)	1



Foamtec International  
720 Venture Dr.  
Waco, TX 76712

Foamtec International WCC Division

1-760-599-7160

www.foamtecintlwcc.com | customerservice@foamtecintlwcc.com

©2020 Foamtec International. All rights reserved. PharmaMOP® is a registered trademark of Foamtec International. We reserve the right to correct any errors that may occur within this datasheet.